



# グット・ケア

# NEWS

2017/2月号  
(株)生きがい工房  
グット・ケア



いつもグット・ケアをご利用頂き、厚くお礼申し上げます。  
今回は、新型バスボードのご案内です。  
この機会に是非、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

## 新商品！

## バスボード はねあげくん

### はねあげ座面で、浴槽入浴をより安心して行えます。



枕形状の裏座面→

←壁付け手すりと併設可

最大使用者体重: 100kg

オイルダンパーにより、ゆっくり閉まる座面→


【はねあげくんなら！】  
座面を“はねあげられる”ので、  
お一人でも安全に入浴できます。  
※取り付け可能な浴槽かどうか、事前にご確認ください。(安寿カタログに記載)

つまり…

- 【結論①】自立入浴できる！
- 【結論②】介助負担を軽減できる！

さらに…

【結論③】“グリップを2個取り付けて”、浴槽またぎ動作用の用具としても使えます。

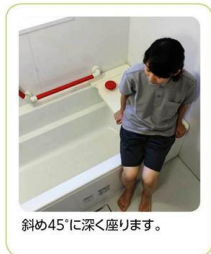

斜め45°に深く座ります。



グリップを握り、身体を安定させます。



浴槽側の足を浴槽に入れます。



洗い場側の足を浴槽に入れます。



Point!

グリップを握って身体を引き寄せるのが難しい方でも、グリップに掌を乗せてプッシュアップできます。



グリップを握って中央に移動します。



手すりにつかまって立ち上がり、バスボードをはねあげます。



静かにお湯に浸かります。(縦手すりを使えば、より浴槽から出やすくなります。)

商品のご注文・お問い合わせはこちらまでご連絡下さい→TEL 076-269-1555

商品名	サイズ	定価	販売価格
アロン化成 バスボード H-S はねあげくん	幅76×奥行40×高さ15cm:重量約5.8kg	¥42,984 →	¥34,387
アロン化成 バスボード H-L はねあげくん	幅82×奥行40×高さ15cm:重量約5.9kg		



< 福祉用具貸与事業所 1770105508 >

# グット・ケア

〒920-0365 石川県金沢市神野町東33番地  
TEL(076)269-1555 FAX(076)269-1155

